



BIENVENUE CHEZ LR ZEITGARD !

ENTREZ DANS UNE
NOUVELLE ÈRE
DE LA BEAUTÉ

FÉLICITATIONS, VOUS POSSÉDEZ DÉSORMAIS LE NOUVEAU ZEITGARD PRO !

Avec l'appareil cosmétique ZEITGARD PRO, vous avez fait le choix parfait pour vos soins de beauté quotidiens. Grâce à quatre modules différents, l'appareil vous offre de nombreuses possibilités d'utilisation pour votre routine de soins individuelle : nettoyage en profondeur des pores du visage, peeling intensif, booster anti-âge ou raffermissment de la peau du corps.

Choisissez les soins de base adaptés à votre âge et aux besoins de votre peau - les ESSENTIALS. Complétez-les par vos SPECIALS, que vous pouvez utiliser quotidiennement en alternance, en fonction des besoins individuels de votre peau. Dans l'aperçu des pages 10 et 11, vous trouverez rapidement vos soins personnels préférés. Découvrez une nouvelle routine de beauté quotidienne dans le confort de votre propre maison !

POUR UNE BEAUTÉ
INTEMPORELLE DE VOTRE
PEAU !



CONTENU



Page 04	NETTOYAGE DU VISAGE MODULE NETTOYANT FACE CLEANSING
Page 05	NETTOYAGE DU VISAGE MODULE EXFOLIANT FACE PEELING
Page 06	SOIN DU VISAGE MODULE LISSANT FACE SMOOTHING
Page 07	NOUVEAU SYSTÈME D'ACHEMINEMENT DES SUBSTANCES ACTIVES
Page 08	SOIN DU CORPS MODULE SCULPTANT BODY SKINCARE
Page 09	SOIN DU CORPS CRÈME POUR LE CORPS
Page 10	ESSENTIALS POUR SOINS QUOTIDIENS
Page 11	SPECIALS POUR PARFAIRE LE SOIN



*Appareil cosmétique faisant l'objet d'une demande de brevet en Allemagne pour une utilisation à domicile avec embouts interchangeables : N° de brevet : 10 2022 200 747.6



Changez
l'embout brosse
tous les 3 mois !



UNE PEAU SAINÉ EN PROFONDEUR

La nuit, la peau se régénère intensément. Elle sécrète du sébum et les cellules mortes sont remplacées par de nouvelles. C'est pourquoi la peau doit être soigneusement nettoyée le matin.

ÉTAPE 1 : humidifiez votre visage à l'eau avant utilisation et répartissez la crème nettoyante sur la peau. Allumez l'appareil et commencez le nettoyage doux de la moitié gauche puis droite du visage ainsi que du front (zone T), pendant une vingtaine de secondes à chaque fois.

ÉTAPE 2 : Après le nettoyage, purifiez la peau avec le tonique.



2 FOIS PAR JOUR

Le **Module nettoyant** séduit par son concept unique en matière d'hygiène. Les filaments doux de la brosse de nettoyage sont enveloppés du principe actif antibactérien Microsilver BG™*.

Associée avec le Module nettoyant, la **crème nettoyante** nettoie la peau en douceur mais en profondeur. La crème nettoyante douce à l'extrait de guarana aide la peau à se régénérer et améliore son aspect. Résultat : un teint revitalisé, délicatement matifié.

28000

* La substance active MICROSILVER BG™ de LR qui englobe chacun des filaments de la brosse leur permet de rester parfaitement hygiéniques pendant 3 mois. MICROSILVER BG™ est une poudre d'argent avec structure moléculaire hautement poreuse. La particularité : MICROSILVER BG™ régule durablement la reformation des bactéries.

GOMMAGE INTENSIF

Tous les 28 jours environ, la peau se renouvelle ! Les peaux mortes donnent rapidement à votre teint un aspect terne et fatigué. Utilisez donc l'accessoire de peeling 2 fois par semaine, en alternative à la brosse pour le visage, pour éliminer les vieilles peaux et donner de l'éclat à votre visage !

ÉTAPE 1 : appliquez à la main la crème nettoyante sur le visage humide, rincer à l'eau et ne pas sécher le visage.

ÉTAPE 2 : Mettre l'appareil en marche et le faire glisser doucement avec la spatule métallique sur le visage bien humidifié en formant un angle de 45° pendant 3 minutes maximum. Procéder toujours de l'intérieur vers l'extérieur et de bas en haut.



2 FOIS PAR SEMAINE

Le Module exfoliant, doté d'une technologie ultrasonique innovante, permet d'éliminer avec précision l'excès de sébum des pores ainsi que les follicules pileux. La peau paraît ensuite visiblement plus lisse, plus fraîche et plus jeune.



La lotion tonique clarifie et apaise la peau après le traitement avec la brosse nettoyante ou le peeling par cavitation. Elle renforce la fonction protectrice naturelle de la peau grâce au Zinc PCA, à l'allantoïne et au panthénol et a un effet tonifiant grâce à l'extrait de harungana.

28001

BESOIN D'UNE DOSE SUPPLÉMENTAIRE DE SOINS ?

Pour des résultats optimaux, vous pouvez utiliser la lotion tonique pour appliquer le Module exfoliant du visage. Il est important que votre visage soit toujours bien hydraté. N'oubliez pas d'appliquer à nouveau le toner après le peeling !

BEAUTÉ INTEMPORELLE TEINT RAYONNANT

Une belle peau n'est pas une question d'âge mais de soin adapté. Le **Module lissant** redonne tonus et élasticité à la peau de votre visage. Il permet aux substances actives de vos produits de soin de pénétrer plus profondément dans la peau et de réduire ainsi sensiblement les rides.

ÉTAPE 1 : nettoyez votre peau avec le Module nettoyant ou le Module exfoliant.

ÉTAPE 2 : appliquez votre produit de soin Nanogold, Beauty Diamonds ou Platinum. Déposez un peu de crème en différents endroits du visage et massez pour faire pénétrer à l'aide du Module lissant. Travaillez sur le côté gauche du visage, puis sur le côté droit et enfin sur le front pendant 30 secondes à chaque fois. Veillez à effectuer des mouvements concentriques de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut.



ENVIE D'UN COUP DE FOUET
FRAICHEUR ?



POUR LE CONTOUR DES YEUX :
CRÈME CONTOUR DES YEUX-MASQUE

Appliquez la crème contour des yeux en masque 2 à 3 fois par semaine. Elle fait des merveilles !

28319 / 28194




LA SYNERGIE ENTRE LES ULTRASONS ET LE SYSTÈME D'ACHEMINEMENT DES PRINCIPES ACTIFS



SYSTÈME D'ACHEMINEMENT DES PRINCIPES ACTIFS

Simultanément au lancement du nouveau Zeitgard pro, nous avons intégré dans les formulations de certains produits de soin un **système d'acheminement des principes actifs** novateur. Ce système fonctionne comme un booster anti-âge. Associé au Module lissant, il améliore considérablement l'efficacité cosmétique des précieux ingrédients en les acheminant en premier lieu de façon ciblée vers la cellule cutanée avant des les faire entrer directement dans la cellule. Une fois le transporteur arrimé, les substances actives sont libérées à l'intérieur de la cellule afin de déployer tous leurs effets. Il est ainsi possible d'agir sur l'origine même du vieillissement cutané et de ralentir celui-ci grâce à un apport ciblé en nutriments.

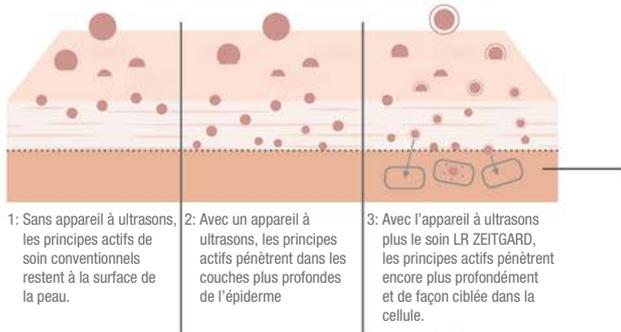

Principe actif sans système d'acheminement des principes actifs

Principe actif avec système d'acheminement des principes actifs dans la cellule cible



Le principe actif encapsulé se fixe sur la cellule



Le principe actif encapsulé pénètre dans la cellule



Libération du principe actif dans la cellule cible

TROUVEZ À LA PAGE 10 LES PRODUITS DE SOIN QU'IL VOUS FAUT

28193

28317

28449



2 X PAR JOUR AVEC LE **MODULE LISSANT**

UNE PEAU PLUS FERME ET LISSE


Vous souhaitez avoir une peau plus ferme sur le ventre et les cuisses ? C'est chose faite avec le ZEITGARD PRO ! Le Module sculptant raffermi et homogénéise votre grain de peau. Utilisé quotidiennement, il ressert le tissu conjonctif et réduit la peau d'orange

ÉTAPE 1 : appliquez la crème pour le corps 1 à 2 fois par jour.


ÉTAPE 2 : massez la crème pour le corps à l'aide du Module sculptant pour la faire pénétrer sur chaque partie du corps, l'une après l'autre, pendant environ 2 minutes. Passez l'appareil en légers mouvements concentriques des jambes et des fesses vers l'aine et sur le ventre puis sur les bras en direction des aisselles.

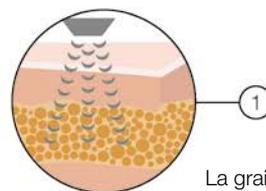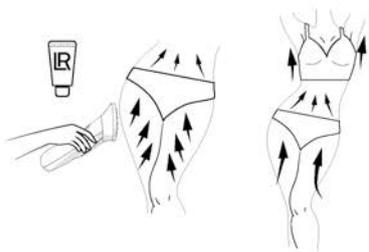

La graisse dans les cellules cutanées forme une surface non homogène et donne à notre grain de peau pré-utilisation un aspect « ondulé ».

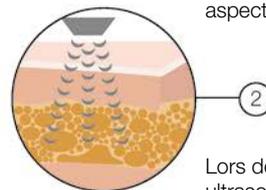

Lors de l'application des ultrasons, la graisse présente dans les cellules de la peau se liquéfie.

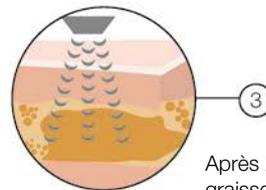

Après 2 minutes environ, la graisse des cellules cutanées de la zone à traiter sont entièrement liquéfiées et prêtes à se reformer en une surface homogène et lisse. Résultat: le grain de peau est visiblement plus lisse et plus ferme.

AU

QUOTIDIEN :

utilisez tout simplement votre Module sculptant après votre douche quotidienne. Impossible de prendre plus soin de soi !



La **crème pour le corps** aide la peau à constituer du collagène et l'hydrate. Le panthénol et la vitamine E renforcent sa fonction de barrière, l'acide hyaluronique la repulpe visiblement. Votre gagne en élasticité et en tonicité et est douce et lisse au toucher.

28002



Système d'acheminement des principes actifs : le principe actif encapsulé raffermi la peau et réduit la rugosité de celle-ci

VUE D'ENSEMBLE : "ESSENTIALS" POUR VOTRE ROUTINE DE BEAUTÉ QUOTIDIENNE

Associés aux quatre modules de l'appareil cosmétique ZEITGARD PRO, les ESSENTIALS offrent le meilleur du soin à votre visage et à votre corps. Choisissez tout simplement parmi tous ces produits ceux qui correspondent à votre âge et aux besoins de votre peau et redécouvrez votre peau sous un nouveau jour !

ZEITGARD PRO

NETTOYAGE DU VISAGE

SOIN DU VISAGE

SOIN DU CORPS



2x par jour

+



2x par semaine

+



+



NANO GOLD
Femmes
de moins
de 40 ans



2x par jour

+



Nanogold



Beauty
Diamonds



crème contour
des yeux

**BEAUTY
DIAMONDS**
Femmes
de plus de
40 ans



Nanogold



Beauty
Diamonds



crème contour
des yeux

PLATINUM
Hommes
à partir de
25 ans



Crème tout-
en-un



2x par jour

+



VOS "SPECIALS" POUR UN SOIN ENCORE PLUS EFFICACE

SPECIALS | 11

Vous souhaitez faire encore plus et mieux pour votre peau ? Utilisez donc, en plus des ESSENTIALS, les SPECIALS selon votre envie, votre humeur et les besoins de votre peau. Choisissez les produits complémentaires qu'il vous faut en fonction de votre forme du jour, de la saison ou de l'occasion.

COMMENT APPLIQUER LES SPECIALS ?

Choisissez le Special qui répondra à ce dont votre peau a besoin à l'instant T et appliquez-le après avoir nettoyé votre peau et avant votre soin habituel. Faites pénétrer ensuite les deux produits simultanément dans la peau à l'aide du Module lissant anti-âge. Seul le Sleeping Mask sera utilisé tel quel durant la nuit.

SPECIAL CARE



Une peau du visage sèche et terne ?

Votre teint est visuellement sec et terne ? La Beauty Diamonds Radiant Youth Oil et ses six huiles naturelles et vitamines régénère la peau et confère à votre teint un rayonnement de jeunesse. Let it glow !

28314



Besoin d'une protection active contre le vieillissement numérique ?

Vous utilisez votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur tous les jours ? Vous êtes dans ce cas exposé(e) en continu à la lumière bleue, laquelle peut accélérer le vieillissement cutané. Le Blue Light Defender Serum protège votre peau du vieillissement numérique.

71060



Qu'attendez-vous d'un anti-rides ?

Une occasion spéciale se présente et votre peau se doit d'être visuellement parfaite et lisse le plus rapidement possible ? Emparez-vous du Serox Instant Result Serum : votre arme fatale anti-rides à effet immédiat !

28251



Une régénération à la demande ?

Vous avez connu des journées stressantes qui ont imprimé pâleur et fatigue sur votre visage ? Ce n'est pas une fatalité ! Chouchoutez votre peau pendant votre sommeil avec le Sleeping Mask. Pour un teint qui a retrouvé au matin sa fraîcheur et son éclat.

71011

BIEN D'AUTRES SPECIALS GÉNIAUX SONT À DÉCOUVRIR !

Pour plus d'informations, parcourez la COLLECTION LR et le site LRworld.com. Votre partenaire LR sera également à même de vous conseiller plus en détail sur l'ensemble des produits.

VOTRE INSTITUT DE BEAUTÉ À DOMICILE



Technologie de
pointe et novatrice



Recommandé par
les experts



Cosmétique
professionnelle comme
en institut



Formules de
soin hautement
efficaces

Transmis par :

La vente des produits LR est effectuée
par les partenaires LR.

LR Health & Beauty Systems GmbH · 59227 Ahlen

LR Health & Beauty Systems se réserve toute modification des produits du fait
d'améliorations techniques et qualitatives ainsi que toute erreur du fait d'éventuelles erreurs
d'impression.

96665-004
FR